



加腾实验室设备

物料安全存储专业方案



公司简介

常熟加腾电子，长年致力于物料安全存储解决方案的探索，经过十多年的耕耘，目前服务网点分布全球40多个国家和地区。CATEC品牌先后在中国及全球注册成功，成为欧美最受欢迎的实验室设备品牌之一。

我司拥有强大的温湿度控制和板材结构优化处理的专业队伍，一流的钣金、喷涂、电子加工、组装、检测等先进的加工设备，生产厂7000平米。产品质量稳定可靠，拥有10多项国家专利。我司提供的物料安全存储的解决方案，将成功解除广大用户针对湿敏元器件受湿气损坏和易燃易爆物料引起生产安全事件等问题的担忧。

加腾电子实验室设备，包括电子防潮箱、氮气柜、智能更衣柜、电子烘箱、安全柜、通风柜、试剂柜和集气罩等，广泛用于电子、军工、研究机构、政府机关、高等院校、化工企业、制药、照明等行业。均已通过ISO9001,CE,ROHS认证，恭候您的检阅！




科技领先一步 品质服务大众




产品特点:

- 柜体材料和隔板都是1.0mm优质冷轧钢板，重要折弯部位厚度达3mm
- 门镶3.2mm钢化玻璃
- 柜体及隔板表面静电粉末喷涂处理，进口杜邦粉末原料。防静电表面电阻在 $10^6 \sim 10^8 \Omega$ ，颜色蓝黑色。柜体标准件均为不锈钢标准件。柜体喷塑5%盐雾试验可达500小时（国家标准48小时），具有超强的抗腐蚀性
- 平面加压把手锁一体化设计。大柜子底部装有可移动带刹车脚轮，方便移动及固定
- 数码显示温度湿度，温度湿度单独显示，无需切换
- 原装进口HONEYWELL低漂移数字式湿度传感器。湿度显示误差 $\pm 3\%RH$ 。湿度显示范围0~99%RH，温度显示范围-9℃~99℃
- 数码管在设计上采用特殊点亮技术，既保证了亮度，又能节约显示电能，符合目前低碳经济要求
- 湿度显示带有校验调整装置，方便客户进行设备维护，可将偏差过大的显示恢复到正常值。也方便客户日常的检验与调整
- 产品通过ROHS环保认证、CE品质认证，并拥有多项发明专利

极限控湿： $< 5\%RH$

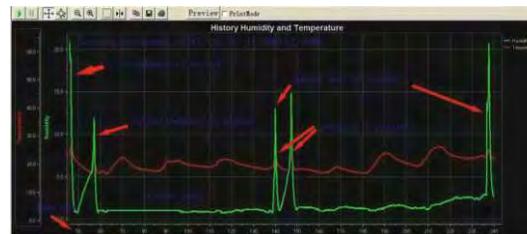

LED数显

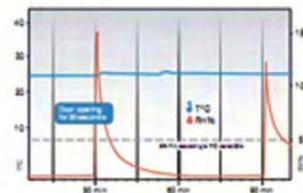

产品名称	系列	控湿范围	模式
中湿度防潮箱	A	20-60%RH	手动可调
低湿度防潮箱	B	10-20%RH	手动可调
超低湿防潮箱	C/U	1-10%RH/1-5%RH	全自动



型号	控湿范围(RH)	外尺寸 (长*宽*高 mm)	内尺寸 (长*宽*高 mm)	平均 功率 (W)	最大 功率 (W)	是否防 静电
DRY98EA	20%~60%	448*400*688	446*372*598	13	91	是
DRY98EB	10%~20%	448*400*688	446*372*598	18	126	是
DRY98EC	1%~10%	448*400*688	446*372*598	18	126	是
DRY1436EA-6	20%~60%	1198*710*1910	1198*682*1723	40	280	是
DRY1436EB-6	10%~20%	1198*710*1910	1198*682*1723	80	560	是
DRY1436EC-6	1%~10%	1198*710*1910	1198*682*1723	120	840	是
DRY1436EU-6	1%~5%	1198*710*1910	1198*682*1723	120	840	是

氧含量、湿度双控复合柜

对于极易发生氧化的元器件，如银件、铜件、钨件以及高精度光学元器件，仅仅控制湿度是远远不够的，氧含量的探测和控制成必须。为此，我们在防潮箱控湿功能的基础上，加装了控氧装置，此为国内行业内首创。



产品特点：

- 增加全自动氧含量控制模块，并配合除湿主机对箱内空气进行除湿和控氧，能使箱内氧含量、湿度在数分钟之内达到要求
- 适合经常开门及防氧化要求严格的工作标的
- 智能控制功能，当箱内氧含量达到设定点时自动切断氮气供应，当高于设定点时会自动打开氮气供应，从而大大节约氮气消耗
- 原装进口高精度氧含量传感器，精度高寿命长。氧含量最低可设定到0.1%
- 原装进口电磁阀

温湿度警示仪

对于温湿度环境条件要求比较高的实验室及相关工作场所，适用本设备。

1. 温湿度显示及检测范围

- 温度范围：-9.9℃~+70℃，误差±1℃
- 湿度范围：0.1%RH~99.9%RH，误差±3%RH
- 输入电压：AC85~240V电压，功率5W
- 采用进口湿度传感器
- 可挂在墙上使用
- 4英寸高亮数码显示，可实现30米远程观察

2. 温度、湿度过高或过低会警报，上下限值可设定，内置闪亮报警器及高分贝蜂鸣器



外形尺寸：W340*H360*D55mm

型号	温度范围 (°C)	湿度范围 (RH)	显示屏	数据读取
CTT-18D	-9.9 to +70°C(±1.0°C)	0.1 to 99.9%(±3.0%)	单面	无
CTT-18DU	-9.9 to +70°C(±1.0°C)	0.1 to 99.9%(±3.0%)	单面	有
CTT-18DT	-9.9 to +70°C(±1.0°C)	0.1 to 99.9%(±3.0%)	双面	无
CTT-18DUT	-9.9 to +70°C(±1.0°C)	0.1 to 99.9%(±3.0%)	双面	有



7英寸液晶触摸显示屏，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度监控，一体化报警系统



专业规范的警示标签



严格按照OSHA标准，设静电接地传导端口，方便连接静电接地导线

51mm高的防漏液防闭火装置的双透气孔槽防止意外流出的液体不外溢(FM标准)



全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔38mm绝缘层(FM标准)


防漏式层板可上下自由调整

厚度1.2mm优质钢板，使用寿命更长，防火性更好

柜子内外都喷涂环氧树脂漆



防闭火装置的双透气孔

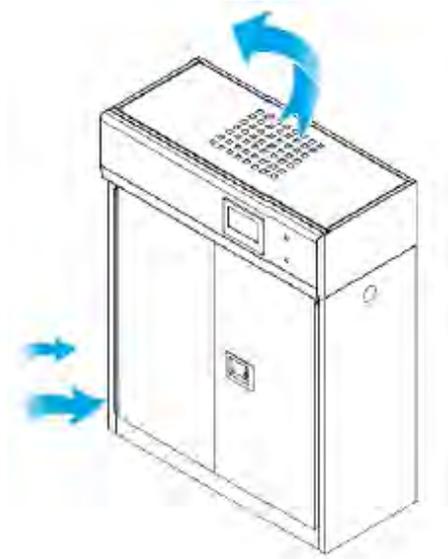

规格型号	外尺寸 (长*宽*高)	门型	锁具	电压 频率	功率 电流	颜色	配置	选配
CFS-Z030	1090*460*1400mm	双开门	双锁	220V 50Hz	40W 2A	黄色(环氧树脂喷涂)	过滤器4个, 风机1个, 镀锌层板1块, 7英寸液晶触摸屏, 控制系统1套, 报警系统一套	层板 移动底座
CFS-Z045	1090*460*1930mm	双开门	双锁	220V 50Hz	40W 2A	黄色(环氧树脂喷涂)	过滤器4个, 风机1个, 镀锌层板2块, 7英寸液晶触摸屏, 控制系统1套, 报警系统一套	过滤器饱和报警器 过滤器

进口PLC风机，性能稳定，超静音，无静电火花



可选机械密码锁，磁锁或电子锁

柜体所有零部件包括门把手螺丝全部采用304不锈钢材质，美观大方，耐用防腐蚀

柜体采用1.2-2mm优质冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理



高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%



电源符合GB 10409-2001中5.5的要求

柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维，质轻，耐高温，热稳定性极好，无毒环保



柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用优质PP(聚丙烯树脂)板，柜底右侧设304可调进风口，有不锈钢可调风阀，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的漏液槽，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等易燃物品，挡板与柜体连为一体，柜底装有移动钢轮，便于柜子移动，2前轮带手动调节罗杆方便定位



柜体配备3个三层阶梯式的PP活动隔板，层板设有10mm透气孔



无缝式钢琴铰链确保门能开180度，柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件符合GB 16807-2009的要求



7英寸液晶触摸显示屏，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度监控，一体化报警系统

规格型号	外尺寸 (长*宽*高)	门型	锁具	电压 频率	功率 电流	颜色	配置	选配
CFS-WYRG30	900*510*1960mm	双开门	电子密码锁，双锁	220V 50Hz	40W 2A	黄色（环氧树脂喷涂）	过滤器4个，风机1个，PP阶梯式活动层板3块，7英寸液晶触摸屏，控制系统1套，报警系统一套	层板 移动底座
CFS-WDRG30	900*510*1960mm	双开门	电子密码锁，双锁	220V 50Hz	40W 2A	蓝色（环氧树脂喷涂）	过滤器4个，风机1个，PP阶梯式活动层板3块，7英寸液晶触摸屏，控制系统1套，报警系统一套	过滤器饱和报警器 过滤器



产品特性：

- 1、柜体：主框架采用优质纯料 PP(聚丙烯)板制作，经过同色同质焊条焊接而成。耐酸碱性能优异。顶部采用顶罩式抽气设计，同质PP材料导流板，耐酸碱性能优异。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取最大的废气捕捉性能。
- 2、操作台面：通风柜台面采用与上柜体整体焊接设计，人员操作面设有挡水防溢处理，台面可根据客户需求配备其他材质台面；上水槽根据用户要求配置。
- 3、下部柜体：储物柜体，采用瓷白色耐酸碱PP材质，经折弯工序使立柱形成“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。
- 4、移动门：无段式设计，手感轻盈，5mm透明钢化玻璃视窗，耐酸碱性能优异。调节门边框为灰色PPc型槽，嵌入式结合，以确保安全及耐用性。每台通风柜采用调节门悬吊钢索连接，PP材质调节门平衡配重箱设计。
- 5、电路设备：开关采用带液晶显示功能的集成控制器面板，可视化控制各项参数，含风机开关，照明开关，总电源开关。每台通风柜安装带防溅盖220V/10A 电源插座2个。
6. PP材质具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，克服了传统通风柜在高温浓酸环境下易生锈、变黄、龟裂等缺陷。适用于各类高洁净度实验室如：药物实验室、食品实验室、半导体实验室、痕量金属实验室、生物实验室等，广泛应用于化工、医学、汽车、钢厂、大学以及科研机构等行业。

型 号	CF1200	CF1500	CF1800
外型尺寸 (L*W*H)	1200*850*2350mm	1500*850*2350mm	1800*850*2350mm
移门 最大开度	820mm (标准垂直调节门)		
调节门全开，表面风速为 0.5m/s 时之排气量(约)	23.4CMM/840CFM	30.6CMM/1100CFM	50.8CMM/1825CFM
台面材质	瓷白色 PP (聚丙烯) 板材，厚度 8MM 折弯加厚防溢设计。可选配实芯理化板台面、环氧树脂台面或陶瓷台面等。		
操作视窗	透明钢化玻璃板，厚度 5MM		
集 气 罩	锥型缩口集气风罩		
标准配置			
照明设备	全罩式日光灯 30Wx1	全罩式日光灯 30Wx1	全罩式日光灯 40Wx1
电源插座	AC220V/10A 四只		
电路控板	日光灯、液晶面板式开关和总控电路板各一只		
遥控水阀	纯水一只 自来水一只 (选配)		
PP 水槽	1 只 (选配)		
可选配置			
水槽、气考克、水考克、各类风机、电源插座、防爆照明、文丘里阀控制、碟阀控制变频器控制、触摸屏、面风速检测、声光报警等			




产品特点：

- 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔38mm绝缘层，1.2mm优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好(FM标准)
- 三点联动式门锁，可选配挂锁，实现双人双锁安全管理
- 51mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢(FM标准)
- 专业规范的警示标签
- 装设有防闭火装置的双透气孔
- 独有的防溢漏式层板可上下自由调节
- 钢琴式铰链便于平滑关闭，门轻松自如启闭180度
- 焊接的搁板层档确保稳固可靠
- 柜子内外都喷涂环氧树脂漆，表面光亮，耐腐蚀，抗潮湿
- 柜身设有静电接地传导端口，方便安全卸掉静电

- CATEC安全柜严格依照OSHA29 CFR1910.106和NFPA CODE30的标准生产，并通过第三方欧盟CE权威认证，产品品质达到并超越国际市场对安全存储产品的要求。
- 安全存储柜系类有黄（指示易燃物品）、红（指示可燃物品）、蓝（指示弱腐蚀性物品）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放危险品类型不同。
- 在储存危险品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险物体，这样做又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。



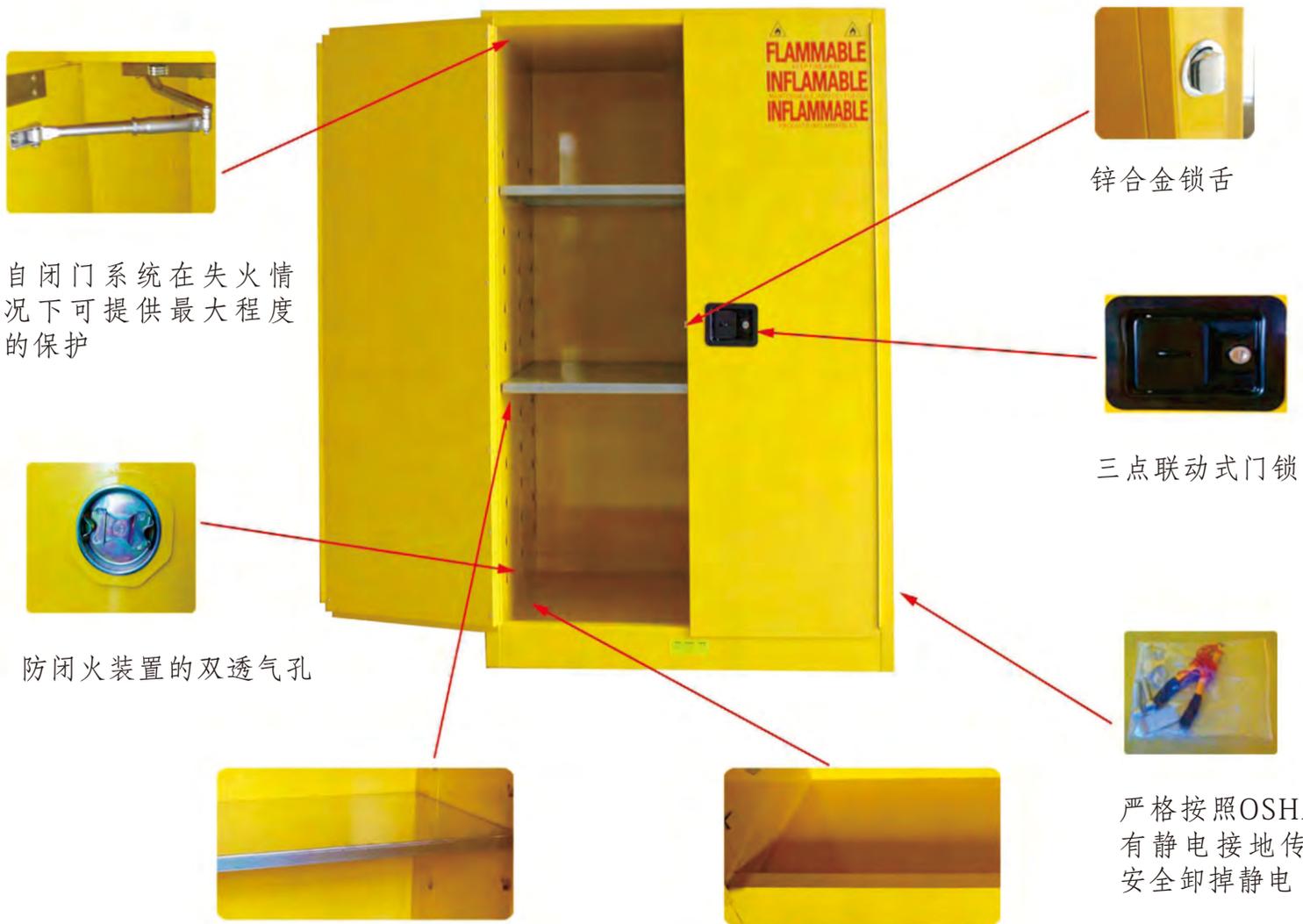

自闭门系统在失火情况下可提供最大程度的保护



锌合金锁舌



三点联动式门锁



防闭火装置的双透气孔



严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便安全卸掉静电



优质镀锌层板可上下调节高度，采用挂钩样式



51mm高的防漏液防闭火装置的双透气孔槽防止意外流出的液体不外溢(FM标准)



黄色指示易燃物体

红色指示可燃物体

蓝色指示弱酸弱碱

根据闪点，我们将能燃烧的液体分为两类四级：

第一级：闪点在28℃以下，如汽油、酒精等

第二级：闪点在28-45℃之间，如丁醇、煤油等

第三级：闪点在46-121℃之间，如苯酚、柴油等

第四级：闪点在121℃以上，如润滑油、桐油等

属于第一、第二级的液体为**易燃液体**，属于第三、第四级的液体为**可燃液体**。



规格型号	容积 (升)	外形尺寸 (长/宽*高 CM)	内部尺寸 (长/宽*高 CM)	颜色	重量 (KG)	配置	选配
CFS-G004	15	43*43*56	35*33*46	红黄蓝	34	单门/手动，一板可调， 一根接地线	
CFS-G012	45	59*46*89	51*36*79	红黄蓝	60	单门/手动，一板可调， 一根接地线	
CFS-G022	83	60*46*165	52*36*155	红黄蓝	90	单门/手动，三板可调， 一根接地线	
CFS-G030	114	109*46*112	101*36*102	红黄蓝	100	双门/手动，一板可调， 一根接地线	自闭门
CFS-G045	170	109*46*165	101*36*155	红黄蓝	138	双门/手动，二板可调， 一根接地线	70度熔断丝
CFS-G060	207	86*86*165	78*76*155	红黄蓝	165	双门/手动，二板可调， 一根接地线	震动报警
CFS-G090	340	109*86*165	101*76*155	红黄蓝	190	双门/手动，二板可调， 一根接地线	温湿度报警
CFS-PD01	单油桶	86*86*165	78*76*165	黄色	195	双门/手动，一板可调， 一根接地线，一组滚轴	烟雾报警
CFS-PD02	双油桶	150*86*165	142*76*155	黄色	355	双门/手动，一板可调， 一根接地线，二组滚轴	PP托盘 防漏槽

产品特点：

- 微电脑控制技术温控系统
- 采用优质镍铬合金加热器，功率低
- 独特的风道设计，使气流按照规定方向循环，工作室温度均匀度变化小
- 保温材料采用优质耐高温玻璃纤维棉
- 1.0mm厚度钢板满焊打磨制作，表面喷塑处理，柜体喷塑5%盐雾试验可达500小时（国家标准48小时），具有超强的抗腐蚀性
- 内胆均为优质SUS304不锈钢钢板，厚度1.0mm
- LCD液晶显示
- 搁板网架高度可调
- 箱门有双层钢化玻璃观察窗，便于用户观察内部情况
- 纳米材料门封条令整机性能更优越
- 耐高温风机，寿命更长
- 产品通过ROHS环保认证、CE品质认证
- 可升级组网，可选局域网或程控型，方便集中管理



立式真空干燥箱250℃



立式鼓风干燥箱250℃



高温干燥箱400℃



台式真空干燥箱250℃



台式鼓风干燥箱250℃

产品名称	型号	外尺寸mm	内尺寸mm	参数	层板	
台式鼓风干燥箱	DCTG-9023A	580*480*440	300*300*270	RT+10~250°C, AC220V 50HZ, error 0.1°C/±0.5°C, 500~1050W	2	
	DCTG-9053A	700*530*520	420*350*350		2	
	DCTG-9123A	830*530*720	550*350*550		2	
	DCTG-9203A	880*730*770	600*550*600		2	
	DCTG-9025A	580*480*440	300*300*270	RT+10~300°C, AC220V 50HZ, error 0.1°C/±0.5°C, 500~2100W	2	
	DCTG-9055A	700*530*520	420*350*350		2	
	DCTG-9125A	830*530*720	550*350*550		2	
	DCTG-9205A	880*730*770	600*550*600		2	
立式鼓风干燥箱	VCTG-9030A	480*500*630	340*320*320	RT+10~250°C, AC220V 50HZ, error 0.1°C/±0.5°C, 500~2100W timing 0~9999min	2	
	VCTG-9070A	550*530*760	400*350*450		2	
	VCTG-9140A	590*730*860	450*550*550		2	
	VCTG-9240A	640*780*1060	500*600*750		2	
	VCTG-9420A	740*730*1670	600*550*1300	RT+10~250°C, AC220V 50HZ, error 0.1°C/±0.5°C, 4000~6000W, timing 0~9999min	3	
	VCTG-9620A	940*780*1690	800*600*1300		4	
	VCTG-9920A	1140*780*1990	1000*600*1600		4	
	VCTG-9425A	740*730*1670	600*550*1300		3	
真空干燥箱	VCTG-9625A	940*780*1690	800*600*1300	RT+10~300°C, AC220V 50HZ, error 0.1°C/±0.5°C, 4000~7500W, timing 0~9999min.	4	
	VCTG-9925A	1140*780*1990	1000*600*1600		4	
	VCTF-6020	580*450*450	300*300*275		RT+5~250°C, AC220V 50HZ, error 0.1°C/±0.5°C 500~3500W, timing 0~999min, vac. Degree 133pa	1
	VCTF-6030	630*510*460	320*320*300			1
	VCTF-6050	720*525*535	415*370*345	2		
	VCTF-6090	615*590*1470	450*450*450	2		
	VCTF-6210	720*820*1750	560*640*600	RT+10~250°C, AC380V 50HZ, error 0.1°C/±0.5°C, 4100~5500W, timing 0~999min	3	
	VCTF-6250	1050*760*910	700*600*600		3	

产品名称	型号	外尺寸mm	内尺寸mm	参数	层板
高温干燥箱	HCTG-9030A	560*520*700	320*320*300	100~400°C, AC 220V 50HZ, error 0.1°C/±0.5°C, 2000~3500W, timing 0~9999min	2
	HCTG-9050A	640*600*695	410*350*350		2
	HCTG-9100A	690*750*850	450*450*450		2
	HCTG-9200A	945*850*840	600*600*600		2



因为专业 所以精彩

真空泵技术参数

型号Model		DM2	DM4	DM8	DM15
抽气速率(L/S)Displacement speed		2	4	8	15
极限分压强(Pa) Ultimate partial pressure	气镇关 without gas ballast	$\leq 4 \times 10^{-2}$			
	气镇开 with gas ballast	$\leq 8 \times 10^{-2}$			
极限总压强(Pa) Ultimate total pressure	气镇关 without gas ballast	$\leq 5 \times 10^{-1}$			
	气镇开 with gas ballast	$\leq 8 \times 10^{-1}$			
噪声LP/LW	Noise Lp/Lw dB(A)	52/63	54/65	58/71	59/72
进气口直径(DN)	Inlet port	25KF	25KF	40KF	40KF
排气口直径(DN)	Outlet port	25KF	25KF	40KF	40KF
用油量(L)	Oil filling	1.1	1.5	3	4
转速r/min	Rotational speed of pump	1400	1430	1400	1420
电动机功率(kw)	Motor power	0.37	0.55	1.1	1.5(2.2)
重量(kg)	Weight	24	31	60	70
外形尺寸(mm)	Overall dimensions	510×174×274	550×174×274	650×236×383	700×236×383



- 产品专为保护实验室人员在实验操作中的安全而设计，可避免操作者在实验中吸入有毒有害、可致病的或毒性不明的化学物质，为实验室人员提供安全防护
- 无需管道工程，安装便捷，废气不外排
- 先进模块过滤技术，充分吸附和过滤实验操作所产生的有害气体、颗粒粉尘等物质
- 无需消耗空调能耗，高效节能
- 可放置在桌面上或配置移动轮座，方便灵活，适用于任何复杂的实验环境

7英寸液晶触摸显示屏，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度监控，一体化报警系统

进口PLC风机，性能稳定，超静音，无静电火花

柜体为1.2mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂，覆有耐用防化无铅涂层，保持高光洁度并最大限度降低腐蚀和湿气的影响

前板及侧板采用6mm亚克力板，不易老化，无色透明，通体透光，视觉舒适

高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%

LED照明灯功率相当于25W日光灯，不产生热量，安全而不影响实验环境温度，节能环保，工作寿命长

环氧树脂台面具有优越的化学稳定性，超强的抗腐蚀性能，抗冲击性能好，耐高温，一体透芯，使用寿命长，不脱层，不膨胀，不龟裂



规格型号	外尺寸 (长*宽*高)	内尺寸 (长*宽*高)	电压/ 频率	功率/电流	音量	配置	选配
CF-DS800	800*620*1290mm	764*540*860mm	220V-240V 50/60Hz	42W 3A	40dBA	初效过滤器 1 个，高效过滤器 8 个，风机 1 个，LED 照明灯 1 组，7 英寸液晶触摸屏，环氧树脂台面，控制系统 1 套，报警系统一套	固定底座 移动底座 理化板台面 不锈钢台面 工业陶瓷台面 钢化玻璃台面
CF-DS1000	1000*620*1315mm	971*512*885mm	220V-240V 50/60Hz	42W 3A	40dBA	初效过滤器 2 个，高效过滤器 12 个，风机 2 个，LED 照明灯 1 组，7 英寸液晶触摸屏，环氧树脂台面，控制系统 1 套，报警系统一套	可选过滤器型号 SFGL OG: 过滤有机气体 SFGL AG: 过滤酸性气体 HEPA H14: 过滤粉尘和微粒
CF-DM1275	1275*620*1340mm	1172*522*866mm	220V-240V 50/60Hz	42W3A	40dBA	初效过滤器 3 个，高效过滤器 12 个，风机 3 个，LED 照明灯 1 组，7 英寸液晶触摸屏，环氧树脂台面，控制系统 1 套，报警系统一套	
CF-DM1600	1600*620*1340mm	1172*522*866mm	220V-240V 50/60Hz	42W3A	40dBA		
CF-DL1600	1600*790*1495mm	1497*692*1014mm	220V-240V 50/60Hz	42W3A	40dBA		

- 可存储大多数在实验室使用的化学品，净化柜内有毒气体，24小时净化实验室空气，高效环保
- 无需管道工程，安装便捷，废气不外排
- 先进模块过滤技术，完全吸附和过滤实验操作所产生的有害气体、颗粒粉尘等物质
- 无需消耗空调能耗，高效节能
- 配置可移动脚轮，方便移动，提高工作效率

进口PLC风机，性能稳定，超静音，无静电火花




LED照明灯功率相当于25W日光灯，不产生热量，安全而不影响实验环境温度，节能环保，寿命长

门板采用6mm亚克力板，不易老化，无色透明，通体透光，视觉舒适



高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ADTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%

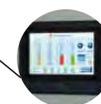

7英寸液晶触摸显示屏，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监控一体化报警

层板采用1.2mm镀锌钢板，防腐涂层抗酸碱，高度可调

酸碱托盘（选配）：Pp板材，存储强酸强碱，耐腐蚀

规格型号	外尺寸 (长*宽*高)	内尺寸 (长*宽*高)	空气处理量	电压 频率	功率 电流	存储容量	配置	选配
CFS-G800	800*620*2360mm	708*450*1750mm	220m ³ /h	220V 50Hz	76W 3A	160瓶 (500ml)	初效过滤器1个，高效过滤器8个，风机1个，层板8块，LED照明灯1组，7英寸液晶触摸屏，控制系统1套，报警系统一套	层板 移动底座 过滤器饱和和报警器 酸碱托盘 过滤器
CFS-G1600	1600*510*2395mm	971*512*885mm	220m ³ /h	220V 50Hz	110W 3A	320瓶 (500ml)	初效过滤器1个，高效过滤器8个，风机1个，层板20块，LED照明灯1组，7英寸液晶触摸屏，控制系统1套，报警系统一套	层板 壁挂式 过滤器饱和和报警器 酸碱托盘 过滤器
CFS-GS819	819*354*725mm	753*322*519mm	75m ³ /h	220V 50Hz	42W, 3A	48瓶 (500ml)	高效过滤器1个，风机1个，层板2块，LED照明灯1组，7英寸液晶触摸屏，控制系统1套，报警系统一套	层板 壁挂式 过滤器饱和和报警器 酸碱托盘 过滤器



产品特点:

- 外观简洁大方，稳重典雅。机身一体化设计，金属框架结构，优质冷轧钢板静电喷塑工艺，持久耐用
- 进风口法兰独特的造型曲线设计，更符合流体动力学原理。
- 安装人性化无级调速器，可随意调节风量及吸力大小
- 产品体积小巧，无需安装，有利于工作空间整洁美观，移动方便
- 直流无刷电机，内置控制器形式，性能、质量更有保障
- 运行稳定，低噪音，高效率，低能耗，工作时间长。无需定期保养
- 涡流式后向风轮，特殊合金材质有效防止风轮被腐蚀。独有的动平衡校正技术，让风轮运行更平稳可靠。高风量，大吸力，过滤速率高
- 三重逐层过滤，确保有害烟尘被滤除得更彻底。净化率可达99.97%。模块化设计，层层保护。初、中、高效可单独更换，滤芯使用寿命长，更换成本低
- 内部独特的密封结构，加上特殊的密封材料，使有害物质得以全部通过过滤系统。内置式循环主动过滤方式，避免将室内冷气/暖气排出室外，不破坏操作区间的温度和湿度环境
- 机器配以万向吸烟臂，可随意变向、定位（长度可根据客户要求定制）。上部装有新型集烟罩，造型独特，吸烟效率高

型号	CF-200S	CF-200D
进风接口	φ75 mm	φ75 mm*2
输入电压	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz
额定功率	120W	300W
过滤效果	0.3μm 99.97%	0.3μm 99.97%
噪音	<50dB	<55dB
吸烟管	φ 75mm*L1.3M, 单工位	φ 75mm*L1.3M, 双工位
风量	260m³/h	360m³/h
机身尺寸 (mm)	W405×D300×H440	W405×D300×H440
运行环境	温度:10-50℃, 湿度 80%RH 以下, 室内使用	



手机充电柜



产品特点:

- 产品通过CE和ROHS认证，柜体为1.0-1.2mm优质钢板。橘纹烤漆表面处理，耐腐蚀性强，盐雾试验达400小时
- 广泛应用于工厂车间进门处，给员工或外来人员临时存放手机或者其他电子产品，配合员工门禁卡使用，方便管理，安全可靠，也可采用临时密码纸方式
- IC/ID卡刷卡存取手机，方便实用
- IC卡可采用随机方式，也可绑定一人一抽或一卡对多方式，操作灵活，实用性强
- 可设定管理员卡，通过管理员卡方便进行IC/ID卡信息的删除或增加
- 可进行应急开门、锁门、查询等操作
- 用户界面采用点阵带背光的大屏幕液晶显示屏，提示用户和管理者的操作
- 语言提示用户取密码条和关门
- 有齐全的各种记录备查
- 钢化玻璃门方便用户观察
- 可接受定制，为您量身订做



型号	外部尺寸/mm	箱格尺寸/mm	电源/功率	颜色
CT40CP	W1200*D300*H1792	W184*D280*H154	220V, 50/60 Hz 待机 10W, 工作 30W	可接受 定制

电子更衣柜



产品特点：

- 产品通过CE和ROHS 认证，柜体为1.0-1.2mm优质钢板。橘纹烤漆表面处理，耐腐蚀性强，盐雾试验达400小时
- 广泛用于无尘车间或洁净室，方便员工或外来人员存放无尘服，洁净服。配合员工门禁卡使用，一门一卡，方便管理
- IC/ID卡刷卡存取包，方便实用，
- IC卡可采用随机方式，也可绑定一人一抽或一卡对多方式，操作更灵活，实用性更强
- 可设定管理员卡，通过管理员卡方便进行IC/ID卡信息的删除或增加
- 可进行应急开门、锁门、查询等操作
- 用户界面采用点阵带背光的大屏幕液晶显示屏，提示用户和管理者的操作
- 语言提示用户取密码条和关门
- 红外检测物品功能，提高了物品存放的安全性
- 有齐全的各种记录备查
- 可接受定制，为您量身订做
- 配备不锈钢挂衣杆、小搁板，利于客户有效利用空间存放

型号	外部尺寸/mm	箱格尺寸/mm	电源/功率	颜色
CT4	W830*D430*H1800	W270*D410*H840	220V, 50/60 Hz 待机 10W, 工作 30W	可接受 定制
CT6	W125*D430*H1800			
CT8	W1670*D430*H1800			
CT12	W2300*D430*H1800			



加腾集团：
常熟市加腾电子设备厂
常熟市加腾电子科技有限公司
常熟市加腾电子进出口有限公司
地址：常熟市高新技术园区苏州路188号
电话：400-6099-878, 0512-52899768
传真：0512-52780898
网址：www.labprovide.cn
Email：catec@labprovide.com